


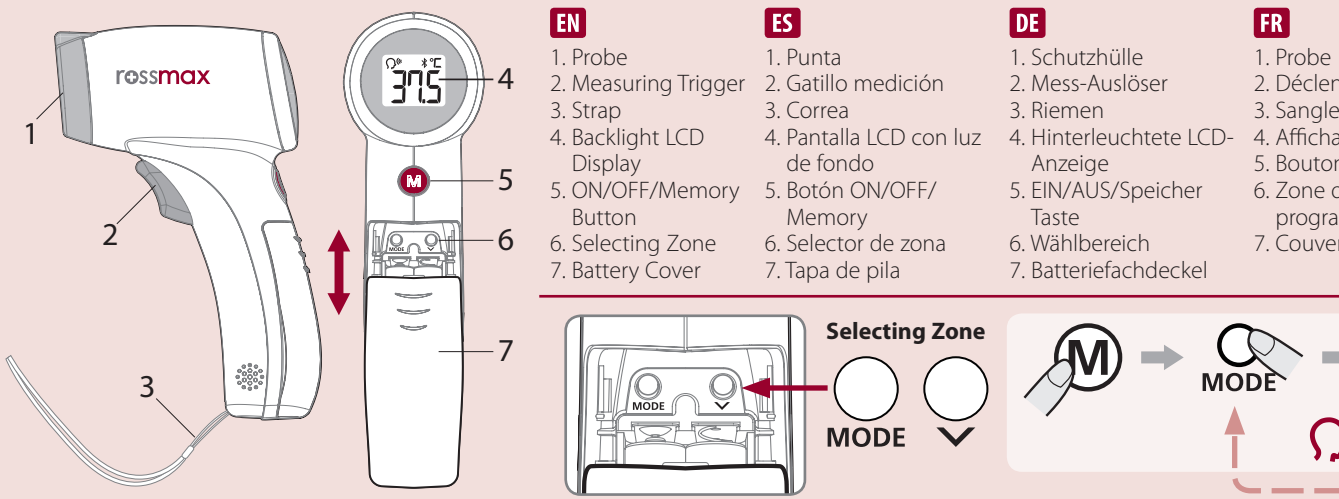

EN English

Introduction

Rossmax non-contact temple thermometer uses an infrared detector to detect body temperature from the temple for adult and child in the hospital, home or public place. This thermometer could also detect object temperature.

The quality of the infrared temple thermometer has been verified and conforms to the provisions of the EC Council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applied harmonized standards. Comply with ASTM E1965-98(2016). This thermometer converts the temple temperature to display its 'oral equivalent' (according to the result of the clinical evaluation).

Please read the instruction manual carefully before using the product and be sure to keep this manual.

Function	The thermometer has been designed for practical use. It's not meant to replace a visit to the doctor. Please also remember to compare the measurement result to your regular body temperature. The object mode shows the actual, unadjusted surface temperatures, which is different from the body temperature. It can help you to measure any object other than body surface, for example the baby's milk. If thermometer detects a body temperature >37.5°C (99.5°F) there will be four beeps sound with flashing redlight to warn the user for potential fever.
Temple Temperature	
Object Mode	
Fever Alarm	

Setting your thermometer

- Open the battery cover.
- Press "ON/OFF/Memory" button to power on the device.
- Enter the setting mode by pressing the "MODE" button to switch Temple/Object temperature, Celsius/Fahrenheit scale, and adjust Bluetooth and beep sound in order.
- Change the measuring target between the temple and object by pressing the "MODE" button to set a new measuring target, the measuring site icon on the temple will blink twice, then the "MODE" button to choose whether automatic Bluetooth data transfer and beep sound is activated (Bluetooth symbol ⌘ on or ⌘ off) or deactivated (Bluetooth symbol ⌘ OFF b/ OFF).
- Your thermometer is ready for measurement after all symbols appear or pressing ON/OFF/Memory button again.

Note:
The initial setting is Temple temperature mode, Celsius scale, Bluetooth and beep sound activated as default.
1. Always make sure the probe is clean and without damage.
2. Press "ON/OFF/Memory" button to turn on the device.
3. Make sure the measuring site icon ⌘ is shown on the display before taking measurement.
4. Vertically aim the thermometer at the temple with a distance of less than 10 cm. If the temple is covered with hair, sweat or dirt, remove the obstacle from the temple to improve the measuring accuracy.
5. Press the "Measuring Trigger" button to take temperature. Measurement is complete when you hear a long beep sound.
6. Read the recorded temperature from the LCD display.
7. If Bluetooth has been activated, the data is automatically transferred to the App after successful completion of the binding process, please see Data Transfer via Bluetooth.

Specification	Temple mode: 34~42.2°C (93.2~108°F) Object mode: 34~42.2°C (93.2~108°F) For temple mode: ±0.3°C (0.5°F) during 34~42.2°C (93.2~108°F). For object mode: ±0.3°C (0.5°F) when measuring the object temperature between 6~99.9°C (41~32~199.9°F).
Accuracy	Temple mode: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; Object mode: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; Temperature: -25~55°C (-13~131°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Operating condition	Storage and transportation condition: 700~1060 hPa Memory: 9 sets Display resolution: 0.1 Weight: 160g (without battery) Size: 10.4cm(L) x 5.2cm(W) x 1.5cm(H) Auto shutdown: 60 sec Safety classification: ⌘ Type BF equipment IP classification: ⌘ Protection against water and dust
Disposal of device and batteries according to local regulations	

How to measure temple temperature

- Always make sure the probe is clean and without damage.
- Press "ON/OFF/Memory" button to turn on the device.
- Make sure the measuring site icon ⌘ is shown on the display before taking measurement.
- Vertically aim the thermometer at the temple with a distance of less than 10 cm. If the temple is covered with hair, sweat or dirt, remove the obstacle from the temple to improve the measuring accuracy.
- Press the "Measuring Trigger" button to take temperature. Measurement is complete when you hear a long beep sound.
- Read the recorded temperature from the LCD display.
- If Bluetooth has been activated, the data is automatically transferred to the App after successful completion of the binding process, please see Data Transfer via Bluetooth.

Note:
1. Applications include temperature measurements for Water, Milk, Cloth, Skin or other object.
2. This mode shows the actual, unadjusted surface temperatures, which is different from the body temperature.
3. The object mode shows the actual, unadjusted surface temperatures, which is different from the body temperature.
4. Vertically aim the thermometer at the temple with a distance of less than 10 cm. If the temple is covered with hair, sweat or dirt, remove the obstacle from the temple to improve the measuring accuracy.

Data Transfer via Bluetooth

Pairing the device with your Smartphone

- To begin using Bluetooth for the first time, please visit the website at <http://www.rossmax.com> for the initial set-up instructions.
- Download and install the applicable APP onto your smartphone.
2. bind this device with your smartphone, turn on the device, Bluetooth and the App of smartphone, and follow set-up and binding instructions.
3. The Bluetooth symbol ⌘ will flash on the display that indicates the binding is proceeding.
 - If the binding is successful, the Bluetooth symbol ⌘ will illuminate on the display and the current measured temperature will automatically be transferred to the App.
 - If the binding has failed, the Bluetooth symbol ⌘ will keep flashing until the device shuts off automatically after 1 minute, and the current measured temperature will not automatically be transferred to the App. Please rebind this device with your smartphone.
- Notes:
 - 1. Unbinding your device will not delete the data in the App.
 - 2. If you rebind your smartphone with the device, all prior reading history stored on the phone App will be retained.
 - 3. Bluetooth data transfer will reduce the battery capacity.
 - 4. Electromagnetic interference: The device contains sensitive electronic components. Avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity of the device (e.g. mobile telephones, microwave ovens). These may lead to temporary impairment of measurement accuracy.

Memory Function
There are total 9 set memories for measurement records. If the reading of the thermometer is within the normal temperature range of 34°C to 42.2°C (93.2°F to 108°F), when the measurement is done, the measurement data is saved into memory.
- Press "ON/OFF/Memory" button to repeatedly recall each temperature memory.


Care and cleaning

- Storage temperature range: It should be stored at room temperature between -25~+55°C (-13°F~131°F), RH <85%, 700~1060hPa.
- Keep the unit dry and away from humidity and direct sunlight.
- The probe should not be submerged into liquids.
- Please check the device if it is damaged or if you can't make sure of its safety. Please send the complete device to the nearest retailer for re-calibration.
- Holding the thermometer too long may cause a higher ambient temperature reading of the probe. This may make the body temperature measurement lower than usual. Please try to not touch the thermometer probe part for avoiding the incorrect reading.

Installing Batteries

- Open the battery cover: use thumb to push battery cover out.
- Install or replace 2 AAA Sized batteries in the battery compartment according to the indications inside the compartment.

ES Español

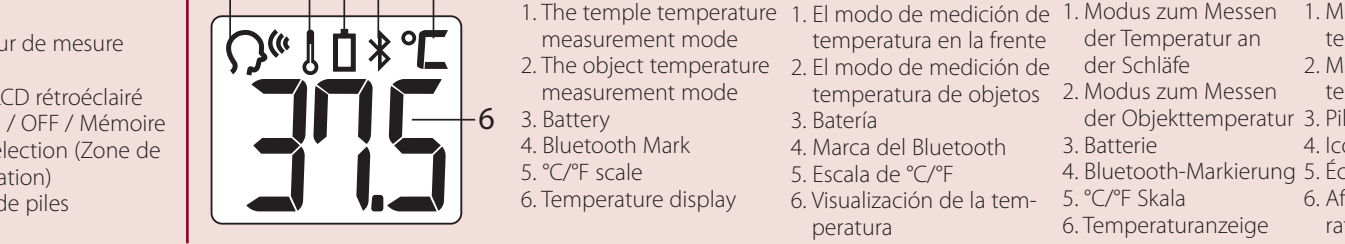

1. El modo de medición de temperatura en la frente.
2. El modo de medición de temperatura de objetos.
3. Batería.
4. Bluetooth Mark.
5. °C/°F scale.
6. Temperature display.
7. Couvercle de piles.
8. Wählbereich.
9. Tapa de pila.
10. Batteriefachdeckel.

La calidad del termómetro frontal infrarrojo ha sido verificada y está en conformidad con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE del Consejo de la CE (directiva de productos sanitarios) Anexo I, relacionada con los requisitos esenciales de seguridad y, las normas armonizadas aplicadas. Conformidad con ASTM E1965-98(2016).
Este termómetro convierte la temperatura en la frente de tal manera que se visualizará su 'equivalente oral' (en conformidad con la evaluación clínica).
Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y asegúrese de guardarlo este manual.

Localización de fallos	Problema	Remedio
EE	El sistema no está funcionando adecuadamente.	Si la pila, espere 1 minuto y vuelva a meterla. Si el mensaje vuelve a aparecer, contacte al distribuidor para un servicio posventa. Deje que el termómetro permanezca por lo menos 30 minutos en un lugar a temperatura ambiente. Para el modo de objeto: 16 ~ 40 °C (60.8 ~ 104 °F). Para el modo de objeto: 10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F).
EI	Exceso del rango de temperatura de funcionamiento.	Seleccione el objetivo dentro de las especificaciones. Si todavía existe un mal funcionamiento, contacte con el distribuidor para un servicio posventa.
HI	En el modo de la frente: La temperatura medida es más alta que 42.2°C (108°F).	Seleccione el objetivo dentro de las especificaciones. Si todavía existe un mal funcionamiento, contacte con el distribuidor para un servicio posventa.
Lo	En el modo de la frente: La temperatura medida es más baja que 34°C (93.2°F).	Seleccione el objetivo dentro de las especificaciones. Si todavía existe un mal funcionamiento, contacte con el distribuidor para un servicio posventa.
Lo	En el modo de la frente: La temperatura medida es más baja que 34°C (93.2°F).	Seleccione el objetivo dentro de las especificaciones. Si todavía existe un mal funcionamiento, contacte con el distribuidor para un servicio posventa.

Configuración de su termómetro
1. Abra la cubierta de la pila.
2. Presione el botón de "ON/OFF/Memory" para encender el termómetro.
3. Entre en la configuración presionando el botón de "MODE" para seleccionar el modo de medición de temperatura en sien/objeto; escala de temperatura: Celsius/ Fahrenheit y ajuste Bluetooth y sonido bip, seguidamente en este orden.
4. Cambie el modo de medición de la siena a un objeto pulsando el botón "MODE".
5. El icono de modo de medición aparecerá en pantalla acorde al modo que seleccione.
6. Cambie la escala de "C a F" presionando el botón "MODE". Presione el botón "MODE" para cambiar a la escala de medición correspondiente. Al configurar otra escala de medición, el icono de modo de medición en la pantalla también cambiará.

Después de que haya seleccionado modo de medición y escala, presione el botón "MODE" otra vez para la siguiente configuración del Bluetooth y sonido bip.
Ajuste el Bluetooth y el sonido bip tal y como se describe anteriormente, usando el botón de "MODE" para elegir si la transferencia automática de datos y el Bluetooth y el sonido bip debe estar activado (símbolo Bluetooth ⌘ on b/ ⌘ on) o desactivado (símbolo Bluetooth ⌘ OFF b/ ⌘ OFF).

Su termómetro está preparado para el modo de medición de aparecer en la pantalla todos los símbolos o pulsando el botón ON/OFF/Memory otra vez.
Notas:
- La configuración inicial o según el valor por defecto es en modo de medición en la sien, escala °C, Bluetooth y sonido bip activado.

Specificación	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de medición de temperatura	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Exactitud	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de temperatura de operación	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de temperatura de almacenamiento	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Memoria	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Alimentación de la pila	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Batería	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Dimensiones	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Apagado automático	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Clasificación de seguridad	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Clasificación IP	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa

Después de que haya seleccionado modo de medición y escala, presione el botón "MODE" otra vez para la siguiente configuración del Bluetooth y sonido bip.
Ajuste el Bluetooth y el sonido bip tal y como se describe anteriormente, usando el botón de "MODE" para elegir si la transferencia automática de datos y el Bluetooth y el sonido bip debe estar activado (símbolo Bluetooth ⌘ on b/ ⌘ on) o desactivado (símbolo Bluetooth ⌘ OFF b/ ⌘ OFF).

Su termómetro está preparado para el modo de medición de aparecer en la pantalla todos los símbolos o pulsando el botón ON/OFF/Memory otra vez.
Notas:
- La configuración inicial o según el valor por defecto es en modo de medición en la sien, escala °C, Bluetooth y sonido bip activado.

Specificación	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de medición de temperatura	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Exactitud	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de temperatura de operación	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de temperatura de almacenamiento	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Memoria	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Alimentación de la pila	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Batería	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Dimensiones	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Apagado automático	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Clasificación de seguridad	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Clasificación IP	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa

Después de que haya seleccionado modo de medición y escala, presione el botón "MODE" otra vez para la siguiente configuración del Bluetooth y sonido bip.
Ajuste el Bluetooth y el sonido bip tal y como se describe anteriormente, usando el botón de "MODE" para elegir si la transferencia automática de datos y el Bluetooth y el sonido bip debe estar activado (símbolo Bluetooth ⌘ on b/ ⌘ on) o desactivado (símbolo Bluetooth ⌘ OFF b/ ⌘ OFF).

Su termómetro está preparado para el modo de medición de aparecer en la pantalla todos los símbolos o pulsando el botón ON/OFF/Memory otra vez.
Notas:
- La configuración inicial o según el valor por defecto es en modo de medición en la sien, escala °C, Bluetooth y sonido bip activado.

Specificación	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de medición de temperatura	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Exactitud	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de temperatura de operación	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Rango de temperatura de almacenamiento	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Memoria	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Alimentación de la pila	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Batería	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Dimensiones	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Apagado automático	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Clasificación de seguridad	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Clasificación IP	En el modo de la frente: 34~42.2°C (93.2~108°F) En el modo de objeto: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa

Después de que haya seleccionado modo de medición y escala, presione el botón "MODE" otra vez para la siguiente configuración del Bluetooth y sonido bip.
Ajuste el Bluetooth y el sonido bip tal y como se describe anteriormente, usando el botón de "MODE" para elegir si la transferencia automática de datos y el Bluetooth y el sonido bip debe estar activado (símbolo Bluetooth ⌘ on b/ ⌘ on) o desactivado (símbolo Bluetooth ⌘ OFF b/ ⌘ OFF).

Su termómetro está preparado para el modo de medición de aparecer en la pantalla todos los símbolos o pulsando el botón ON/OFF/Memory otra vez.
Notas:
- La configuración inicial o según el valor por defecto es en modo de medición en la sien, escala °C, Bluetooth y sonido bip activado.

DE Deutsch

Einführung

Mit dem für den Heimgebrauch vorgesehenen kontaktlosen Infrarot-Thermometer von Rossmax können Sie die Körpertemperatur bei Erwachsenen und Kindern an der Schläfe messen im Krankenhaus, zu Hause oder an einem öffentlichen Ort. Die Messung des Thermometers kann auch die Körpertemperatur erfassen.
Die Qualität des Infrarot-Thermometers für die Schläfe wurde überprüft und entspricht den Forderungen der Richtlinie des EU-Rates 93/42/EWG (Medizinprodukte-Richtlinie) Anhang I, Grundanforderungen sowie den entsprechenden harmonisierten Normen. Erfüllung der Anforderungen nach ASTM E1965-98(2016).
Dieses Thermometer rechnet die Schläfentemperatur in Ihr Äquivalent für „orale Messung“ (entsprechend dem Ergebnis einer klinischen Prüfung).
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und Sie diese auf.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und Sie diese auf.

Funktion	Problem	Lösung
Temperatur der Schläfe	Das System funktioniert nicht richtig.	Nehmen Sie die Batterie heraus, warten Sie eine Minute und setzen Sie sie wieder ein. Wenn die Meldung wieder angezeigt wird, wenden an den Fachhändler.
Objektmodus	Zu hoher Betriebstemperaturbereich.	Bitte wählen Sie einen Bereich innerhalb der Spezifikationen. Wenn weiterhin eine Störung besteht, wenden Sie sich bitte an den Händler.
Fieberalarm	Batterie ist schwach, weitere Messungen sind nicht möglich.	Ersetzen Sie die Batterie.

Das Thermometer ist für den Einsatz in der Praxis vorgesehen. Es ist nicht für einen Arztbesuch, Denken Sie auch daran, das Messergebnis mit Ihrer normalen Körpertemperatur zu vergleichen.
Objektmodus werden die nicht angepassten ist-oberflächen-temperatur angezeigt, die nicht identisch mit der Körpertemperatur sind. Auf diese Weise können Sie kontrollieren, ob die Temperatur des Gegenstands für das Baby oder den Patienten geeignet ist, beispielsweise die Milchtemperatur für das Baby.
Wenn das Thermometer eine Körpertemperatur >37.5°C (99.5°F) misst, gibt das Gerät vier Signaltöne aus, um den Benutzer auf mögliche Fieber hinzuweisen.
In der Thermometer-Einstellung:
1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Drücken Sie die "EIN / AUS / Speicher"-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Wechseln Sie in den Einstellungsmodus, indem Sie die Taste "MODE" drücken, um in den folgenden Modus zu wechseln: Celsius / Fahrenheit-Skala und den Bluetooth- und Signalton-Einstellungen zu wechseln.
4. Ändern Sie das Messziel zwischen Schläfe und Objekt, indem Sie die Taste "MODE" drücken. Nach dem Einstellen eines neuen Messziels wird auch das Messsymbol geändert.
5. Ändern Sie die "C" und "F", indem Sie die Taste "MODE" drücken. Drücken Sie die Taste "MODE", um die entsprechende Messskala zu wählen. Das Symbol im Display zeigt auch nach dem Einstellen einer neuen Messskala entsprechend umgeschaltet.
6. Nachdem Sie das Messziel und die Skala eingestellt haben, drücken Sie die Taste "MODE" erneut, um zur nächsten Bluetooth- und Signaleinstellung zu gelangen.
7. Mit der Taste "MODE" ob die automatische Bluetooth-Datenübertragung und der Signalton aktiviert werden. Das Symbol ⌘ on b/ ⌘ on oder deaktiviert (Symbol Bluetooth ⌘ OFF b/ ⌘ OFF).

Das Thermometer ist für den Einsatz in der Praxis vorgesehen. Es ist nicht für einen Arztbesuch, Denken Sie auch daran, das Messergebnis mit Ihrer normalen Körpertemperatur zu vergleichen.
Objektmodus werden die nicht angepassten ist-oberflächen-temperatur angezeigt, die nicht identisch mit der Körpertemperatur sind. Auf diese Weise können Sie kontrollieren, ob die Temperatur des Gegenstands für das Baby oder den Patienten geeignet ist, beispielsweise die Milchtemperatur für das Baby.
Wenn das Thermometer eine Körpertemperatur >37.5°C (99.5°F) misst, gibt das Gerät vier Signaltöne aus, um den Benutzer auf mögliche Fieber hinzuweisen.
In der Thermometer-Einstellung:
1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Drücken Sie die "EIN / AUS / Speicher"-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Stellen Sie sicher, dass das Messsymbol ⌘ auf dem Display angezeigt wird, bevor Sie eine Messung durchführen.
4. Halten Sie das Thermometer in einem Abstand von maximal 10 cm gerade über die Schläfe. Wird die Schläfe durch Haare, Schweiß oder Schmutz bedeckt, säubern Sie diese zuerst, um die Messgenauigkeit zu erhöhen.
5. Drücken Sie den Mess-Auslöser, um die Temperatur zu messen. Die Messung ist abgeschlossen, wenn Sie einen langen Signalton hören.
6. Lesen Sie die Messspannung von der LCD-Anzeige ab.
7. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Daten nach erfolgreicher Messung automatisch an die App übertragen. Details unter Datenübertragung via Bluetooth.

Spezifikationen	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Temperaturmessbereich	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Messgenauigkeit	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Betriebstemperaturbereich	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Loggetemperaturbereich	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Anzeigeauflösung	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Batterie	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Gewicht	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Dimensionen	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Automatische Abschaltung	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
Sicherheitsklassifizierung	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa
IP-Klassifizierung	Temperaturmessbereich: 34~42.2°C (93.2~108°F) Messgenauigkeit: ±0.3°C (0.5°F) während 34~42.2°C (93.2~108°F). Betriebstemperaturbereich: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%; 700~1060 hPa

Entsorgen Sie Gerät und Batterien entsprechend den lokalen Vorschriften.
Vorsicht:
1. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie die Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben. Haben Sie die Gebrauchsanweisung auf.
2. Thermometer und Patient sollten sich mindestens 30 Minuten vor der Messung in dem Raum befinden, in dem die Messung durchgeführt wird.
3. Es empfiehlt sich, die Temperatur immer an derselben Stelle zu messen, da die Temperaturwerte je nach Messstelle unterschiedlich sein können.
4. Bei der ersten Verwendung des Thermometers, bis der Benutzer sich mit dem Gerät vertraut gemacht hat und konstante Messwerte erhält.
5. Bei der ersten Verwendung des Thermometers, bis der Benutzer sich mit dem Gerät vertraut gemacht hat und konstante Messwerte erhält.
6. Bei der ersten Verwendung des Thermometers, bis der Benutzer sich mit dem Gerät vertraut gemacht hat und konstante Messwerte erhält.

Messen der Körpertemperatur:
1. Drücken Sie die "EIN / AUS / Speicher"-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass das Messsymbol ⌘ auf dem Display angezeigt wird, bevor Sie eine Messung durchführen.
3. Sobald Sie das Messziel korrekt auf das Messziel positioniert haben, drücken Sie die Taste "Messauslöser", um die Temperatur zu messen. Die Messung ist abgeschlossen, wenn Sie einen langen Signalton hören.
4. Lesen Sie die Messspannung von der LCD-Anzeige ab.
5. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Daten nach erfolgreicher Messung automatisch an die App übertragen. Details unter Datenübertragung via Bluetooth.

Messen der Objekttemperatur:
1. Drücken Sie die "EIN / AUS / Speicher"-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass das Messsymbol ⌘ auf dem Display angezeigt wird, bevor Sie eine Messung durchführen.
3. Sobald Sie das Messziel korrekt auf das Messziel positioniert haben, drücken Sie die Taste "Messauslöser", um die Temperatur zu messen. Die Messung ist abgeschlossen, wenn Sie einen langen Signalton hören.
4. Lesen Sie die Messspannung von der LCD-Anzeige ab.
5. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Daten nach erfolgreicher Messung automatisch an die App übertragen. Details unter Datenübertragung via Bluetooth.

Datenübertragung via Bluetooth
Koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone
Bei der Verwendung von Bluetooth besuchen Sie bitte die Website <http://www.rossmax.com> für genaue Anweisung der Einrichtung.
1. Laden Sie die App von Google Play oder App Store.
2. Öffnen Sie